

Respireo **SOFT** Baby

Per favorire il suo primo respiro



Sviluppata in collaborazione con Pneumologi ed Intensivisti Pediatrici, Respireo SOFT Baby è una maschera progettata per bambini dai 3 ai 12 kg.


A differenza degli adulti, la morfologia del viso dei bambini è in continua crescita, presentando una fronte prominente, un ponte nasale non definito ed una struttura ossea fragile in via di sviluppo. La maschera Respireo SOFT Baby è stata progettata per adattarsi a queste specifiche.

Prodotto interamente in silicone, il cuscino si adatta perfettamente al viso del piccolo paziente **con una pressione di contatto minima**. La cuffia, con i suoi cinque punti di fissaggio, è stata specificatamente progettata per garantire **la stabilità e la perfetta tenuta** della maschera attorno al naso senza bisogno di stringere.

La **maschera può essere personalizzata** togliendo il frontale d'appoggio per adattarsi ad ogni tipo di viso.



Respireo **SOFT** Baby

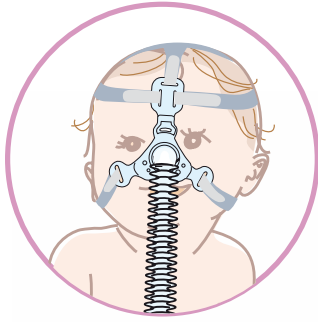

Cuffia a 5 punti di fissaggio

Le larghe cinghie ed i cinque punti di fissaggio assicurano sia basi d'appoggio omogenee che stabilità indipendentemente dalla pressione di trattamento e dalla posizione del bambino.

Cuscino soffice e confortevole

Il labbro singolo e sottile garantisce la tenuta dell'aria e permette di ridurre al minimo la pressione sul viso.

Sistema di esalazione silenzioso e diffuso

Porta supplementare

Per adattarsi a tutti i tipi di ventilazione non invasiva (misurazioni, fornitura ossigeno, ecc.).

Tubo flessibile e rotante a 360°

Per un sensazione di libertà totale.



Disponibile anche nella versione Non Vented



Codici

Respireo SOFT Baby XS	472700
Respireo SOFT Baby S	472703
Cuffia Respireo SOFT Baby XS	472701
Cuffia Respireo SOFT Baby S	472702
Respireo SOFT Baby NV XS	472704
Respireo SOFT Baby NV S	472705
Kit 10 pezzi tubo Vented	472709
Kit 10 pezzi tubo Non Vented	472710

Maschera disinfettabile e sterilizzabile fino a 12 cicli.

È necessario sostituire la cuffia e il tubo per l'uso tra diversi pazienti.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore.

